

LoFric – naiset

LoFric® kertakäyttöinen, hydrofiilinen virtsakatetri.

Virtsarakon toistokattetointihoitoon, lyhyt- tai pitkäaikaiseen käyttöön.

LoFric-katetri on saatavilla vain terveydenhuollon ammattilaisen määräyksellä.


Varmista ennen käyttöä, että noudatat terveydenhuollon ammattilaisen antamia katetointiohjeita ja koulutusta.

Lue pakkauksessa olevasta käyttöohjeesta tärkeät tiedot ja täydelliset ohjeet.

Ota yhteyttä hoidon määränneeseen terveydenhuollon ammattilaiseen, jos ilmenee ongelmia.

Käyttöohjeet

1. Pese kädet vedellä ja saippualla ennen katetointia.
2. Avaa vetämällä pakkauksen kartiopään avausliuskoista.
3. Täytä pakkaus puhtaalla vedellä, kotona vesijohtovedellä ja sairaalassa steriilillä vedellä tai suolaliuksella. Liota katetria 30 sekuntia ennen käyttöä.
4. Kun valmistaudut katetointiin, irrota suojapaperi ja kiinnitä tuote tarraliuskalla kuivaan pintaan.
5. Ota katetri pakkauksesta.
6. Levitä häpyhuulia ja etsi virtsaputken suu emättimen aukon yläpuolelta. Vie katetri toisella kädellä hitaasti virtsaputkeen.
7. Kun virtsa alkaa valua, vie katetria hieman pidemmälle varmistaksesi, että katetrin molemmat silmäaukot ovat virtsarakon sisällä.
8. Kun virtsan tulo lakkaa, vedä katetria hitaasti hiukan ulospäin. Jos virtsaa alkaa valua uudelleen, odota virtsan tulon loppumista, jotta varmistat virtsarakon täydellisen tyhjenemisen. Poista sitten katetri.
9. Aseta katetri takaisin pakkaukseen ja hävitä se asianmukaisesti (paikalliset määräykset voivat vaihdella).

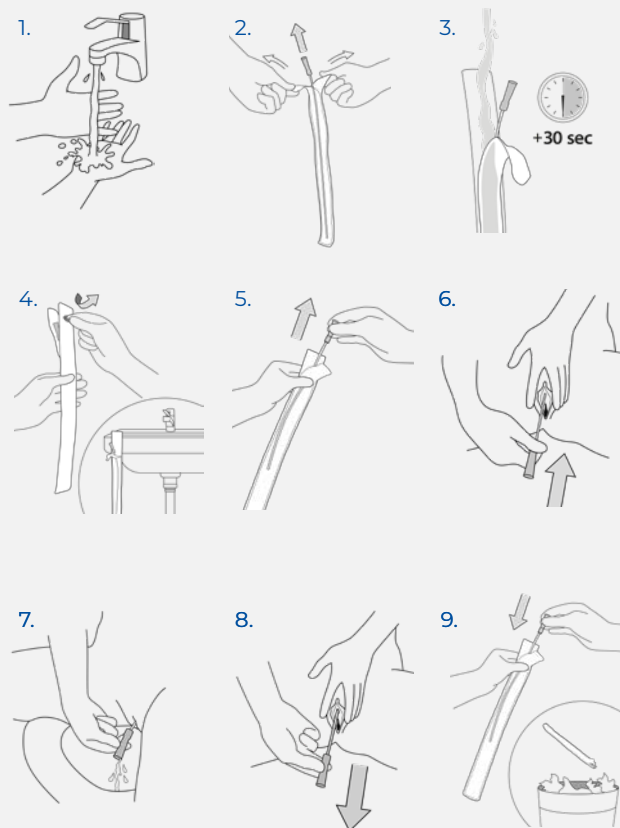

Me Wellspectillä kehitämme kontinenssihoitoon innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat virtsarakon ja suoliston ongelmista kärsivien ihmisten elämänlaatua. Haluamme inspiroida käyttäjiämme parempaan itseluottamukseen ja itsenäisyyteen sekä hyvään terveyteen ja hyvinvointiin. Olemme johtaneet alaa yli 40 vuoden ajan LoFric®-ja Navina™ -tuotemerkeillämme. Tavoitteemme on aina minimoida tuotteidemme ilmastojalanjälki ja pyrimme intohimoisesti olemaan ilmastoneutraali. Teemme tiivistä yhteistyötä käyttäjien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa parantaaksemme tuotteitamme ja palveluitamme kestäväällä tavalla nyt ja tulevaisuudessa.

Wellspect. A Real Difference.

Lisätietoja tuotteistamme ja palveluistamme on osoitteessa [Wellspect.com](https://www.wellspect.com).

Liity keskusteluun LinkedInissä, X:ssä, Facebookissa ja Instagramissa.

[wellspect.fi](https://www.wellspect.fi)



Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden. Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com